


Liko™ Planlyft Flexo™₋ tillbehör



Bruksanvisning

Planlyft Flexo

Art.nr 3156057

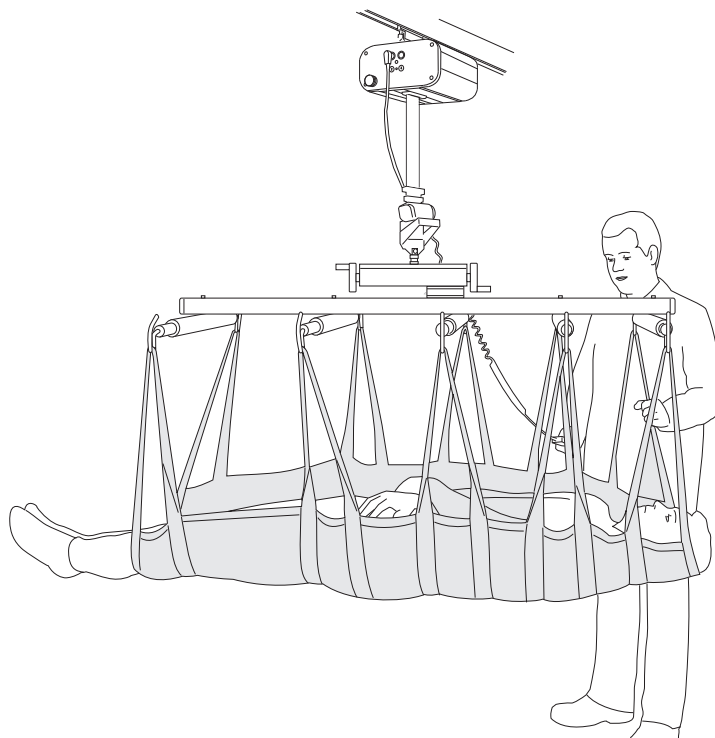

Produktbeskrivning

Planlyft Flexo-tillbehöret är avsett för lyft och överflyttning av brukare i horisontellt ryggläge. Brukaren lyfts upp i en Lyftduk. Du kan justera bredden för planlyften mellan 70 och 95 cm genom att dra ut eller in lyftarmarna.

Planlyft Flexo-tillbehöret är försett med en balanstillsats så att tyngdpunkten enkelt kan justeras under lyftet.

Planlyft Flexo-tillbehöret kan användas tillsammans med: LikoGuard™ taklyft, Likorall™ taklyft, Multirall™ taklyft, Viking™ L mobillyft, Viking™ XL mobillyft och Golvo™ mobillyft.

I dokumentet kallas den som blir lyft för brukare och den som hjälper till för medhjälpare.



VIKTIGT!

Lyft och överflyttning av en person medför alltid en viss risk. Studera därför noga bruksanvisning för såväl lyft som lyfttillbehör. Det är viktigt att helt och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen. Utrustningen får endast användas av utbildad personal. Förvissa dig om att lyfttillbehöret passar till den lyft som används. Iakttag försiktighet och omsorg vid användandet. Som medhjälpare är du alltid ansvarig för brukarens säkerhet. Du måste vara informerad om brukarens möjligheter att klara lyftsituationen. Kontakta tillverkaren eller leverantören om något är oklart.

Innehållsförteckning

Symbolbeskrivning	3
Säkerhetsföreskrifter	4
Definitioner	4
Tekniska data	4
Maxlast	4
Rekommenderade lyfttillbehör	5
Montering.....	6
Placering av Lyftduk.....	7
Lyft med Lyftduk	9
Tillsyn och skötsel.....	10

Symbolbeskrivning

Dessa symboler finns i det här dokumentet och/eller på produkten.

Symbol	Beskrivning
	Varning! Den här situationen kräver extra försiktighet och uppmärksamhet
	Läs bruksanvisningen före användning
	CE-märkning
	Juridisk tillverkare
	Datum för tillverkning.
	Varning! Läs bruksanvisningen
	Läs bruksanvisningen före användning
	Huvudänden på produkten
	Produktidentifikation
	Serienummer
	Medicinteknisk produkt
	Återvinningsbar
	GS1-datamatrixstreckkod som kan innehålla följande information (01) GTIN-artikelnnummer (11) Produktionsdatum (21) Serienummer

Säkerhetsföreskrifter

⚠ Tänk på följande innan du lyfter:


- Kontrollera att lyfttillbehöret är ordentligt fastsatt i lyften.
- Vi rekommenderar att minst två personer hjälps åt vid lyft med Planlyft Flexo™-tillbehöret.
- Planera lyftet så att det sker så säkert och smidigt som möjligt.
- Även om Planlyft Flexo-tillbehöret är försett med urkrokningskydd måste särskild uppmärksamhet iakttas. Innan brukaren lyfts från underlaget, men när banden är ordentligt sträckta, är det viktigt att kontrollera att banden är korrekt kopplade till planlyften.
- Se till att alla hjul på till exempel sängen och britsen är låsta under lyft/överflyttning. Hjulen på den mobila lyftens ska emellertid låsas upp när den används med planlyften.

⚠ Lämna aldrig en brukare utan tillsyn i en lyftsituation.

⚠ Planlyften får inte under några omständigheter modifieras. Om du har frågor kontaktar du Hill-Rom.

CE Medicinteknisk produkt klass I

Definitioner

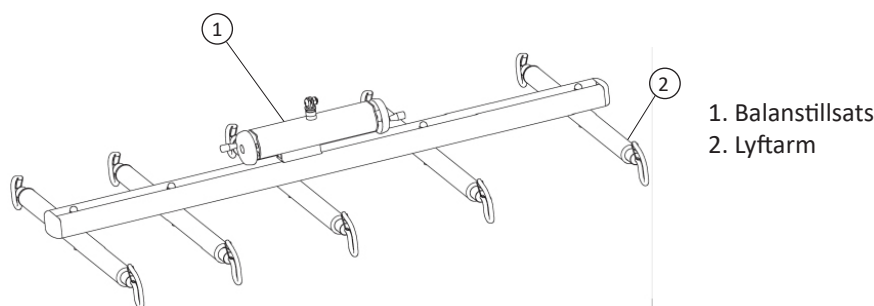

Se Rekommenderade lyfttillbehör sidan 5.

Tekniska data

Maxlast: 300 kg
Bredd: 95 cm

Maxlast

Olika maxlaster kan gälla för olika produkter på det monterade lyftsystemet: lyft, lyftbygel, lyftsele och eventuella andra tillbehör som används. För det monterade lyftsystemet är maxlasten alltid lägsta maxlast för någon av komponenterna. Exempel: Planlyft Flexo™-tillbehöret har en maxlast på 300 kg. I kombination med Snabbkoppling Universal som har en maxlast på 300 kg och en Likorall™ taklyft som har en maxlast på 200 kg gäller maxlasten 200 kg för det monterade lyftsystemet.

Kontrollera märkningen på lyften och lyfttillbehöret. Kontakta en representant för Hill-Rom om du har frågor.

Rekommenderade lyfttillbehör


Lyftduk XL

Lyftduk XL, regular (165 cm)

Art.nr 3684105

Lyftduk XL, tall (185 cm)

Art.nr 3684106

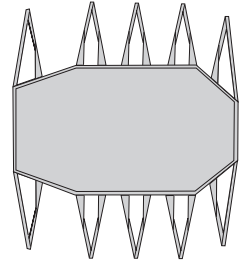


Fast monteringskit 4

Passar Planlyft Flexo™-tillbehöret i kombination med LikoGuard™ taklyft L, XL.

Obs! Ska monteras av personal som har auktoriserats Hill-Rom.

Art.nr 3308860

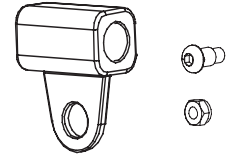


Snabbkoppling Universal

Likos Snabbkoppling Universal är en del av ett system som underlättar snabbt byte av lyfttillbehör på Likos mobila och stationära lyftar. Läs handboken om Likos snabbkopplingar eller kontakta Hill-Rom för att få mer information om fördelarna med snabbkopplingsystemet och hur du använder det.

Max. 300 kg.


Art.nr 3156508

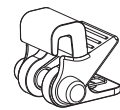

Adapter 12 mm


Max. 300 kg.

Art.nr 2016504

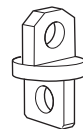

Montering


Fast montering

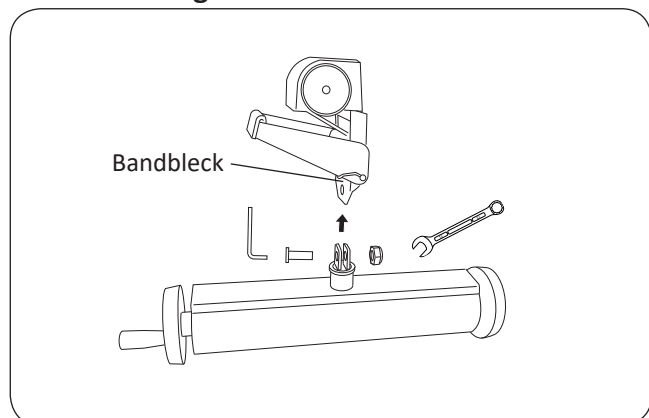

Likorall™ taklyft (inte R2R) och Golvo™ mobillyft

Planlyft Flexo™-tillbehöret monteras med M10x25-skravar och muttrar direkt i bandblecket på lyften.

Rekommenderade verktyg: 6 mm insexnyckel och 17 mm ringnyckel.

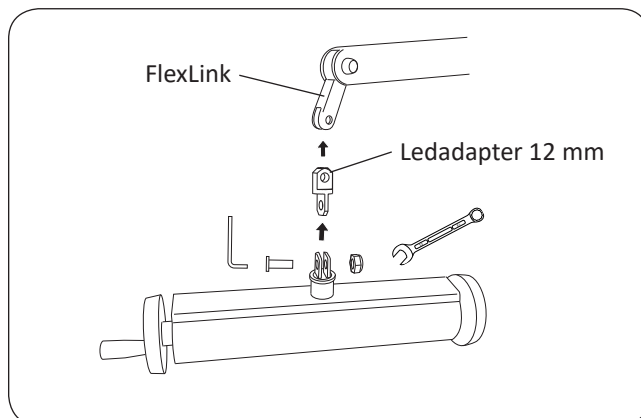


Viking™ L-mobillyft, Viking™ XL-mobillyft

Planlyft Flexo-tillbehöret monteras med M10x25 skruvar och muttrar via tillbehör Ledadapter 12 mm (se sidan 5).

Rekommenderade verktyg: 6 mm insexnyckel och 17 mm ringnyckel.

Montering med Snabbkoppling

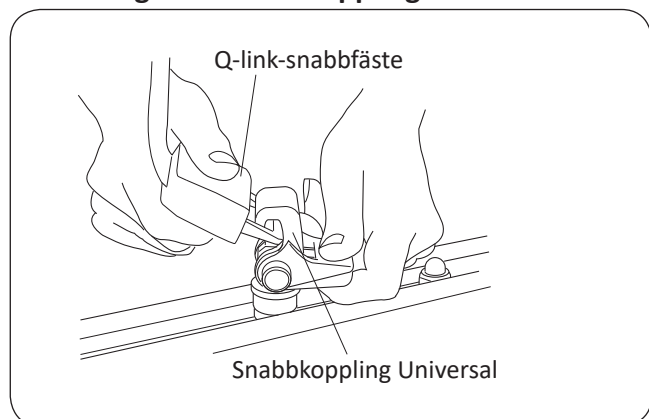

Planlyft Flexo-tillbehöret kan vara försett med Snabbkoppling Universal (se sidan 5) för enkel och bekväm montering i lyften utan verktyg.


Lyften måste vara försedd med Q-link-snabbfäste för att det ska gå att montera Snabbkoppling Universal. För en del lyftar i Likos produktsortiment (Multirall™ taklyft, Likorall taklyft R2R) ingår det här som standardfunktion, medan andra lyftar som är avsedda att användas med Planlyft Flexo-tillbehöret kan kompletteras med Q-link-snabbfäste som tillval.

Placering av Lyftduk

Vid lyft med en Lyftduk är det naturligtvis en fördel om brukaren är rörlig och själv kan lägga sig på lyftduken. Det är ibland fallet i samband med operationer. Operationsborden förbereds och bäddas med en lyftduk under operationsdukarna så att den sövda brukaren kan lyftas och flyttas efter operationen. Det finns två alternativ för att placera en lyftduk under brukare som helt saknar rörlighet: Genom att vända på brukaren eller genom att använda glidlakan.


Alt. 1) Placering av lyftduk genom att vända brukaren

Vid placering av lyftduken krävs att två eller flera medhjälpare hjälps åt. Att vända en brukare på sidan är tungt och kan underlättas med hjälpmedel, till exempel ett draglakan.

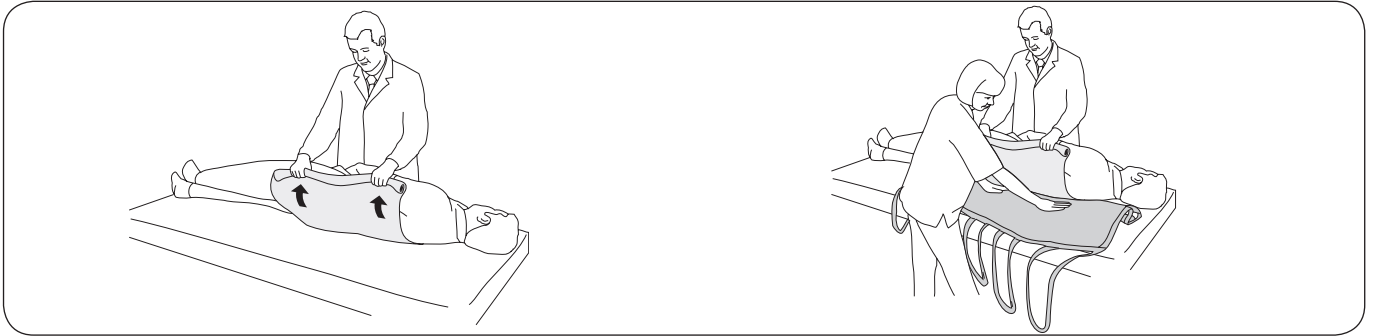

Vänd brukaren på sidan genom att dra draglakanet mot dig. ⚠️ Se till att brukaren har tillräckligt med utrymme i sängen så att det inte finns någon risk att han/hon faller ned på golvet. Det kan vara nödvändigt att öppna sänggrinden. Se till att hjulen på säng, brits osv. är låsta under lyft/överflyttning.

Placera lyftduken så att produktetiketten är vänd uppåt mot huvudändan och nedåt mot sängen. Placera långsidan av lyftduken så långt in under brukaren som möjligt. Vik in mer av lyftduken så att brukaren ligger mitt på lyftduken när brukaren ligger på rygg.

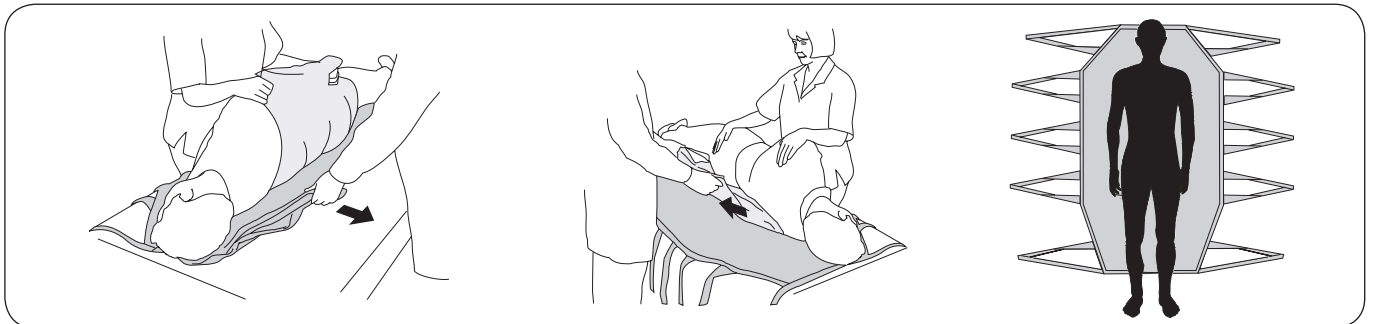


Vänd brukaren något mot den andra sidan så att lyftduken kan dras ut. Nu ska även draglakanet tas bort. Vik in draglakanet under brukaren innan han/hon vänds på rygg.

Vänd brukaren försiktigt så att draglakanet kan tas bort. Lägg brukaren på rygg.

Se till att brukaren ligger på rygg mitt på lyftduken och har stöd för huvudet.


Alt. 2) Placering av lyftduken med hjälp av glidlakan:

Om lyftduken ska placeras under en brukare som inte kan vändas på sidan kan två glidlakan användas. När brukaren ligger på rygg dras två parallella glidlakan på plats under brukaren. Sedan dras lyftduken på plats mellan glidlakanen. När lyftduken placeras med hjälp av glidlakan ska två eller flera medhjälpare hjälpas åt.

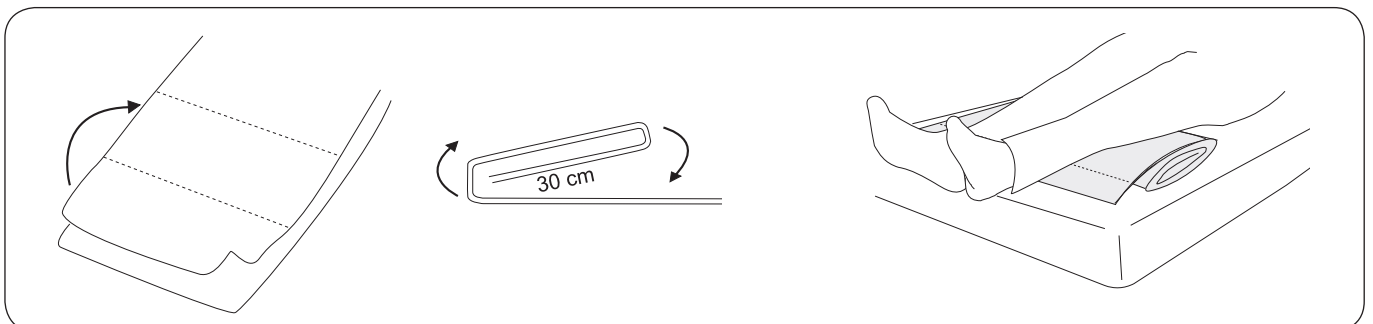


Lägg två glidlakan på varandra. Vik upp dem cirka 30 cm från nederkanten. Upprepa proceduren tills hela längden har vikts upp.

Placera de vikta glidlakanen under brukarens fötter och vader med vecket vänt nedåt mot madrassen.

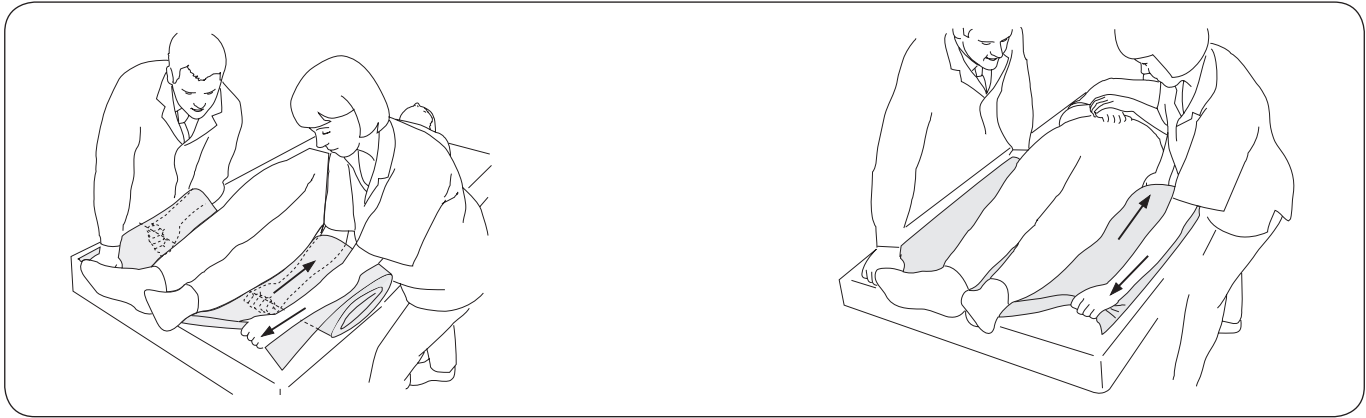


Medhjälparna fattar med den hand som är närmast brukaren tag i vecket i tyget under glidlakanen. Med den andra handen håller de fast den nedre kanten av glidlakanet.

Medhjälparna drar sedan samtidigt ut det första vecket och drar upp det under brukaren. Använd den hand som är närmast brukaren till att dra upp vecket och den andra handen till att skapa ett motstånd genom att trycka nedåt på lakanet.

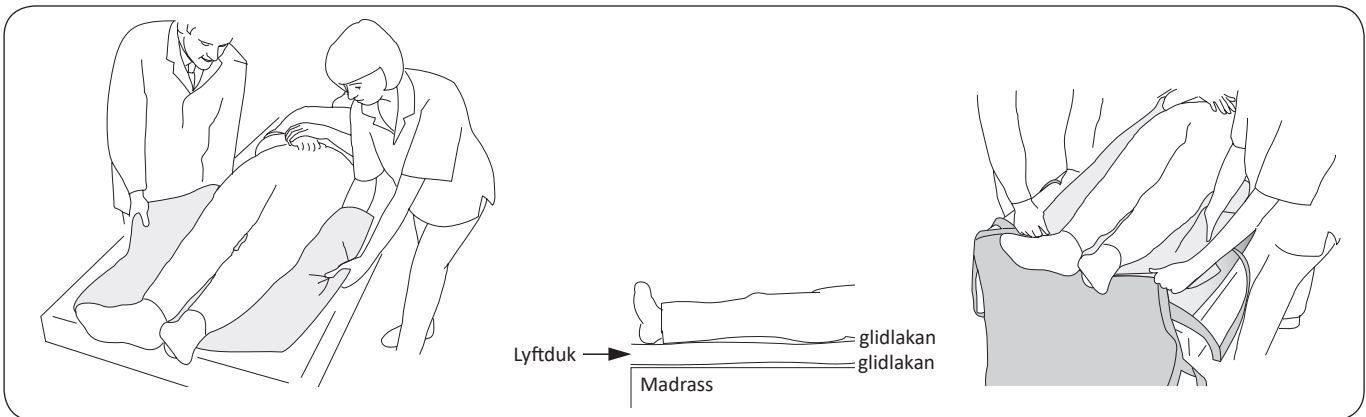

Ta nu tag i nästa veck och upprepa proceduren tills glidlakanen är helt utsträckt under brukaren.

Produktetiketten på lyftduken ska vara vid huvudändan och vänd nedåt mot sängen. Lyftduken dras på plats mellan glidlakanen från fot- eller huvudändan.

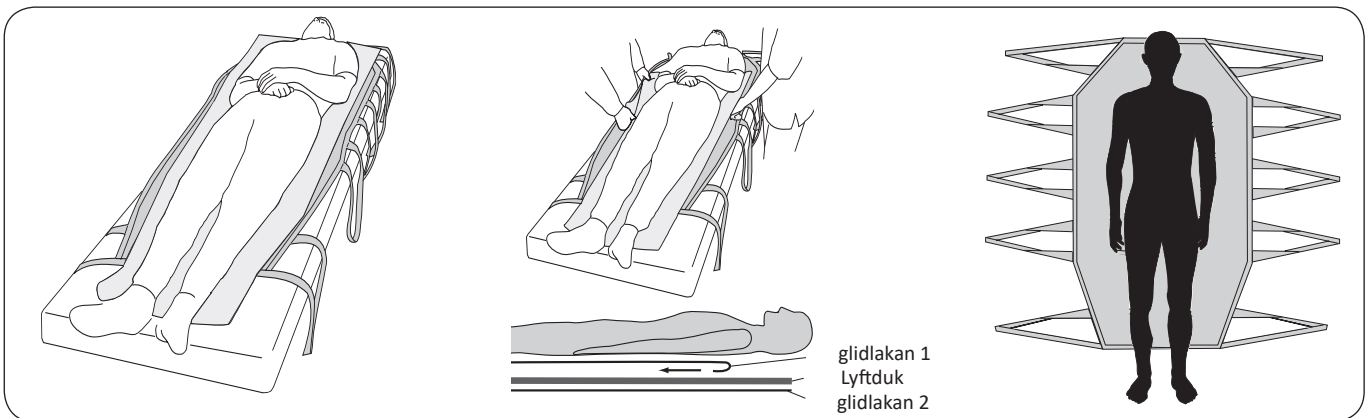



Lyftduken dras på plats under brukaren. Den övre kanten ska vara så långt upp att den når upp under huvudet.

Ta nu bort de glidlakan som är närmast brukaren (glidlakan 1). Det är enklast att börja vid huvudändan och dra lakanen "under sig själva".

Se till att brukaren ligger på rygg mitt på lyftduken och har stöd för huvudet.

Lyft med Lyftduk

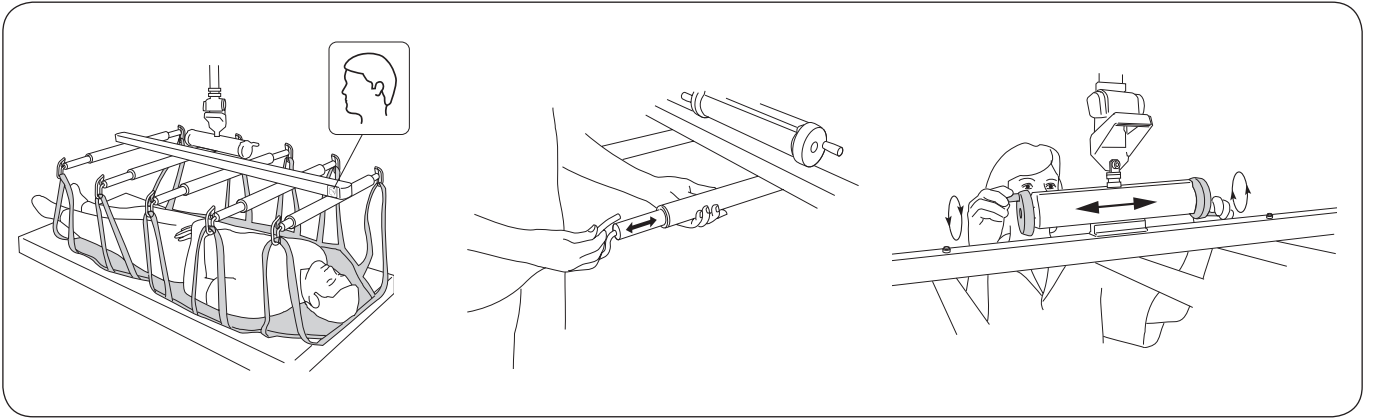

Kom ihåg att Planlyft Flexo™-tillbehöret har en huvudände och en fotände. Se symbolen för huvudände . Placera Planlyft Flexo-tillbehöret över brukaren och sänk det till cirka 50 cm ovanför sängen. Koppla banden till planlyften. Justera bredden för planlyften (70 till 95 cm) genom att dra ut lyftarmarna till lämpligt läge.

⚠ Se till att alla band är ordentligt kopplade till planlyften när banden är ordentligt sträckta men innan brukaren lyfts från underlaget.

Under lyftet ser du till att brukaren hänger i önskat läge, dvs. horisontellt eller, vilket ofta är fallet, något högre med huvudet. Vid behov kan du justera läget genom att vrida ratten på balanstillsetsen.

Tillsyn och skötsel

Kontrollera vissa av lyftens funktioner före varje användningstillfälle för att undvika problem:

- inspektera planlyften och lyfttillbehören för att säkerställa att inga yttre skador har uppkommit
- kontrollera att säkerhetsspärrarna fungerar.

Rengör lyften vid behov genom att torka av den med en trasa fuktad med varmt vatten eller desinfektionsmedel.


Obs! Använd inte rengöringsmedel som innehåller fenol eller klor, eftersom det kan skada aluminium- och polyamidmaterialen.

 **Planlyften ska inte utsättas för rinnande vatten.**

Service

Planlyften ska inspekteras regelbundet, minst en gång per år.

 Regelbunden inspektion ska utföras av personal som auktoriserats av Hill-Rom.

 Service får inte utföras när brukaren är i planlyften.

Serviceavtal

Hill-Rom erbjuder möjlighet att teckna tjänsteavtal för underhåll och fortlöpande tillsyn av Liko-produkten.

Förväntad livslängd

Produkten har en förväntad livslängd på 10 år vid korrekt handhavande, utförd service och periodisk inspektion i enlighet med Likos instruktioner.

Återvinningsinstruktioner

Planlyften ska återvinnas som metallskrot.

Hill-Rom gör utvärderingar och vägleder användarna om säker hantering och kassering av produkter för att förebygga skador, inklusive, men inte begränsat till: skärsår, sticksår, skrubbsår och eventuell rengöring och desinficering av den medicintekniska produkten efter användning och före kassering. Kunderna bör följa alla federala, statliga, regionala och/eller lokala lagar och förordningar som gäller säker kassering av medicinsk utrustning och tillbehör.

Vid tveksamhet ska användaren av enheten i första hand kontakta Hill-Roms tekniska support för råd om säker kassering.

Produktändringar

Likos produkter utvecklas ständigt varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i produkter utan föregående meddelande. Kontakta en representant för Hill-Rom för att få information, råd och eventuella uppdateringar.

Design and Quality by Liko in Sweden


Hanteringssystemet för både tillverkning och utveckling av produkten är certifierat i enlighet med ISO9001 och dess motsvarighet för den medicintekniska branschen, ISO13485. Hanteringssystemet är även certifierat i enlighet med miljöstandarden ISO14001.

Meddelande till användare och brukare i EU

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i relation till produkten ska rapporteras till tillverkaren och berörd myndighet i medlemsstaten där användaren och/eller brukaren befinner sig.



www.hillrom.com

 Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sverige
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom